



NEU

Das innovative,
gepolsterte Bett
zum Schutz vor
Stoßverletzungen

Regia gardo

Das Bett für optimalen Rundumschutz

Krankheiten wie Chorea Huntington, zu deren Symptomen starke unkontrollierte Bewegungen zählen, setzen den Patienten dem Risiko häufiger Stoßverletzungen aus. Oft wird sein Bett dann individuell ausgepolstert, z. B. mit selbst zugeschnittenen Schaumstoffteilen. Das Regia gardo von Burmeier bietet jetzt eine zeitgemäße Lösung an, die Sicherheit, Komfort und eine optimale Hygiene miteinander verbindet.

Das Regia gardo kombiniert alle Stärken eines modernen elektrisch verstellbaren Pflegebettes mit einer maßgeschneiderten Auspolsterung des Innenraums. Häupter und durchgehende Seitensicherungen sind mit aufsteckbaren Polstern verkleidet, die sich mühelos zu einer gründlichen Reinigung abnehmen lassen. Das gesamte Bett ist ein haptisch und optisch angenehmer, würdevoller Ort der Ruhe und Entspannung.

Starke Vorteile

- Niedrigbett zur Vermeidung von Sturzverletzungen
- Höhenverstellung von 26 - 80 cm ermöglicht rückschonendes Arbeiten am Bett
- serienmäßige durchgehende Seitensicherung für zusätzlichen Schutz und die Schaffung seitlicher Polsterflächen
- Sitzposition und Fußtieflage der Liegefläche einstellbar
- sicheres 24-Volt-Antriebssystem
- einfache Montage des Bettes und der Polster
- Lieferung immer mit passender Matratze



Mit dem intuitiv bedienbaren Handschalter lässt sich das Regia gardo durch einen Höhenverstellbereich von 26 bis 80 cm fahren.



▲ Die durchgehende Polsterung bietet dem Bewohner optimalen Schutz für entspannende Ruhephasen.



▲ In der Sitzposition können Bewohner im Bett essen, lesen oder einen Computer nutzen. Der wohnliche Beistelltisch Pleto ist dabei ein idealer Begleiter.



▲ Die seitliche Polsterung bewegt sich mit der durchgehenden Seitensicherung, sodass der Bewohner das Bett auf einer ergonomischen Höhe verlassen und dabei auf dem weichen Polster sitzen kann.



▲ Das Regia gardo wird serienmäßig mit einer Matratze geliefert, die sich den Verstellpositionen der Liegefläche flexibel anpasst.

Funktionen und Details



▲ Die Polster liegen dicht an den Betthauptern an – so entstehen keine unhygienischen Zwischenräume



▲ Segufix-Verschlüsse halten die Enden der seitlichen Polster lückenlos am Bettrahmen.



▲ Die Polster Teile lassen sich für eine gründliche Reinigung einfach abnehmen.



▲ Der lückenlose Rundumschutz schützt die Bewohner vor Stoßverletzungen.

Produktbesonderheiten:



▲ Die optionale Wandabweisrolle verhindert Kollisionsschäden beim Fahren und der Höhenverstellung.



▲ Ein praktischer Klettverschluss sorgt dafür, dass zwischen den seitlichen Polstern und dem Bettrahmen kein Spalt entsteht.


- 4-geteilte Liegefläche für Komfort und gesundheitsfördernde Lagerung
- Seitliche Polsterung wird mit Klettverschluss lückenlos am Bettrahmen gehalten
- Automatischer Rückenlehnenrückzug reduziert Scherkräfte
- Fußtieflage und Sitzposition einstellbar
- Unterschenkellehne elektrisch stufenlos verstellbar
- Elegant verkleidete Rollen mit zentraler Feststellung
- Seitliche Polster Teile bewegen sich mit der Seitensicherung
- Durchgehende Seitensicherungen mit Easy-Click-System werkzeuglos montierbar
- Rundum-Polsterung schützt den Bewohner vor Stoßverletzungen

Ausstattungen und Optionen

Ausführung	Regia gardo mit Standardausstattung: 304400
Liegefläche 90 × 200 cm	✓
Matratze 90 x 209 x 14 cm	✓
Höhenverstellung	26 – 80 cm
sichere Arbeitslast	225 kg
4-geteilte Metall-Liegefläche mit Rückenlehnenrückzug	✓
elektrische Anhebung der Unterschenkellehne (21 cm)	✓
Fußtieflage (15°)	✓
4-Rollen-Zentralfeststellung	✓
Linak-24-Volt-Antriebssystem	✓
Kopf- und Fußteil Nobla (nur Holzdekor)	✓
Dekor Buche Natur	✓
durchgehende Seitensicherung (DSG) mit Easy Click beidseitig	✓
Notabsenkung Batterie (Artikelnummer: 275602)	O
Polsterung	✓
Wandabweisrollen (2 oder 4 Stück Artikelnummer: 269834)	O
Trendenburg-Handscharter (nur für Pflegeeinrichtungen - Artikelnummer: 261651)	O

✓ = Standardausstattung O = optional erhältlich – = nicht möglich

Außenmaße/Höhenverstellbereich:

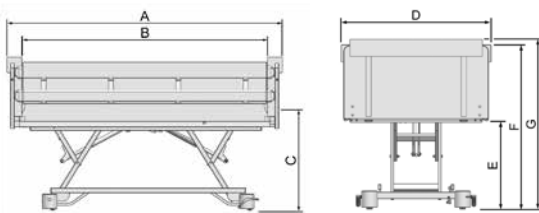

Bettlänge außen (mit Polstern) A	2350
Bettlänge Innenmaß (mit Polstern) B	2080
Liegeflächenhöhe (zur Liegefläche) C	260
Liegeflächenhöhe (zur Oberkante Matratze) C	400
Bettbreite außen (mit Polstern) D	1130
Höhe Unterkante Betthaupt E	130 – 680
Höhe Seitensicherung (mit Polstern) F	700 – 1250
Höhe Betthaupt (mit Polstern) G	750 – 1300
Liegeflächenaufteilung RL-Mtl.-OL-UL	720 – 250 – 330 – 540
Längenausgleich Rückenlehne	110


STIEGELMEYERGROUP
 Solutions for people who care

 
Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Burmeier GmbH & Co. KG
 Industriestraße 53
 32120 Hiddenhausen
 Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
 Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
 info@burmeier.com
 www.burmeier.com


Hauptsitz / Headquarters

Deutschland / Germany
Stiegelmeier GmbH & Co. KG
 Ackerstraße 42
 32051 Herford
 Phone +49 (0) 5221 185 - 0
 Fax +49 (0) 5221 185 - 100
 info@stiegelmeier.com
 www.stiegelmeier.com



stiegelmeier-group.com